

ET VE ET ÜRÜNLERİ İÇİN

Tavuk Kaynaklı Bileşen Hızlı Test Kiti

KAT. NO

SC-DWCF-004



Uygulama Alanları



Çiğ Et

Siğir, koyun ve diğer kırmızı etler



Kıyma & Köfte Harcı

Pişirilmemiş, basit işlenmiş ürünler



Yüzey Sıvısı

Et ürünü yüzeyinden swab ile örnekleme

ET ÜRÜNLERİNDE

TAVUK KATKISI TESPİTİ

Et ürünlerine karıştırılan tavuk kaynaklı bileşenleri **çift antikor sandviç** prensibiyle çalışan lateral akış immünoanaliz (LFIA) ile nitel olarak tespit eden hızlı test kiti.

- **%0,01** tespit limiti ile yüksek hassasiyet
- **8-10 dakikada** sonuç
- **Cihaz gerektirmez**, oda sıcaklığında çalışır
- Et dokusu veya yüzey sıvısından örnekleme
- 2-30 °C'de saklama, **12 ay** raf ömrü

► AVANTAJLAR



HIZLI

8-10 dakikada sonuç



HASSAS

%0,01 tespit limiti



KOLAY KULLANIM

3 damla numune, gözle okuma



CİHAZ GEREKTİRMEZ

Sahada, oda sıcaklığında



EKONOMİK

Test başına düşük maliyet



GÜVENİLİR

Çift antikor sandviç yöntemi

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürün Kodu	SC-DWCF-004	Yöntem	Sandviç LFIA (nitel)
Analit	Tavuk kaynaklı bileşen	Tespit Limiti	%0,01
Numune	Çiğ et ve et ürünleri	Test Süresi	8-10 dakika (oda sıcaklığı)
Ambalaj	10 test / kutu	Saklama	2-30 °C, ışıktan koruyun, dondurmayın
Raf Ömrü	12 ay	Sertifikalar	ISO 9001 · 14001 · 45001

Test Prosedürü

Tavuk Kaynaklı Bileşen Hızlı Test Kiti · SC-DWCF-004



NUMUNE HAZIRLAMA

Test öncesi kit ve numuneleri 15–30 dk oda sıcaklığında (20–25 °C) bekletin; bağıl nem ≤ 70 olmalıdır.

Et Dokusu

~0,2 g dokuyu (soya tanesi büyüklüğünde) solüsyona alıp 10 sn bekletin; swab ile 5–6 kez bastırıp 10–20 sn karıştırın.

Et Ürünü Yüzey Sıvısı

Pamuklu swab ile yüzey sıvısını alın; solüsyonda 10 sn bekletip 10–20 sn karıştırın, ardından swabı çıkarın.

TEST PROSEDÜRÜ

1

15–30 dk



Dengeleme

Kit bileşenlerini ve numuneleri oda sıcaklığına (20–25 °C) getirin.

2

10–20 sn



Ekstraksiyon

Numuneyi ekstraksiyon solüsyonunda swab ile iyice karıştırın.

3

3 damla



Numune Ekleme

S kuyucuğuna dikey olarak 3 damla (80–100 µL) numune ekleyin.

4

8–10 dk



Okuma

Oda sıcaklığında bekleyip okuyun. 10 dk sonraki okumalar geçersizdir.

Kit içeriği: 10 test kartı · 10 tüp ekstraksiyon solüsyonu · 10 swab · Kullanım kılavuzu

Gerekli olan ama sağlanmayan malzemeler: Terazi · Zamanlayıcı · Makas ve bıçak

SONUÇLARIN YORUMLANMASI

NEGATİF (–)


C ve T hatlarının ikisi de görünür.

POZİTİF (+)

Yalnızca C hattı görünür; T hattı görünmez.

GEÇERSİZ


C hattı oluşmadı; testi yeni bir test kartıyla tekrarlayın.

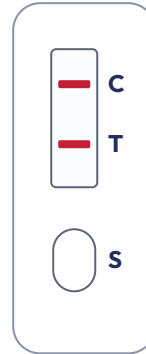

Negatif



Pozitif

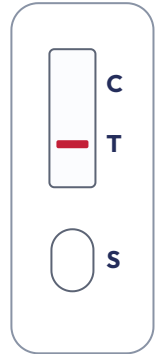

Geçersiz

ÖNEMLİ NOTLAR

- Yalnızca çiğ et ve pişirilmemiş, basit işlenmiş ürünler için uygundur.
- Çapraz bulaşmayı önleyin; makası her numuneden önce temizleyin.
- Tek kullanımlıktır; ambalajı hasarlı kartları kullanmayın.

- Yetersiz numune hacmi yanlış negatif veya geçersiz sonuca yol açabilir.
- Farklı lotlara ait test kartı ve solüsyonları karıştırmayın.
- Solüsyon koruyucu içerir; cilt ve gözle temasından kaçının.

Tarama amaçlıdır; pozitif sonuçlar doğrulayıcı analitik yöntemlerle teyit edilmelidir.



HFS MİKROBİYOLOJİK HİJYEN ÜRÜNLERİ VE HİJYEN ÖLÇÜM CİHAZLARI TİC. LTD. ŞTİ.

info@hfs.com.tr · www.hfs.com.tr